

exocad



ChairsideCAD

Aynı gün diş
hekimliğinde
yeni dönem

High
Quality
Dental
Solutions



exocad.com / onexdental.com



“ChairsideCAD işimi kolaylaştırıyor.”

Geleneksel yöntemle harika bir klinik içi iş akışı her zaman aynı gün içinde sonuçlanmaz. Benim için bu durum, daha iyi bir hasta deneyimi oluşturmak için yeni teknolojiyi entegre etmek demektir. exocad ChairsideCAD, tüm tarayıcılar, kazıyıcı makinalar ve 3D yazıcılar ile birlikte çalışmasını sağlamak için ihtiyacım olan açık bir platform sunmaktadır. Hastalar her şeyin gözleri önünde çalıştığını görmekten hoşlanıyor ve bu teknoloji işimi kolaylaştırıyor. İşlerimin bir kısmı aynı gün bitebiliyor ve bu vakalar için planlanan sonuçları hastalarla resimler, pdf'ler veya exocad webview aracılığıyla paylaşabiliyorum. Daha fazla planlama veya dış kaynak kullanımı gerektiren vakalarda, doğrudan ChairsideCAD programının içindeki dentalshare uygulamasını kullanarak tasarım yardımı alabiliyor ve laboratuvarlar ile iletişim kurabiliyorum. Endikasyon ne olursa olsun exocad ChairsideCAD, dış kliniğindeki hem teknoloji hem de hasta bakımı yönetimi için çözüm sunmaktadır.

Dr. Christopher M Silvoy
Diş hekimi ve Better Dentistry sahibi


Yenilikçi, sezgisel, entegre Klinik kullanımına uygun güçlü bir dental CAD yazılımı

Daha fazla otomatik kontrol ve basitleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ile exocad'in ChairsideCAD'i klinik kullanımı için optimize edilmiştir.

ChairsideCAD, aynı gün diş hekimliği için ilk eksiksiz açık mimarili CAD yazılım platformudur. Klinik içi iş akışı, tasarım süreci boyunca sizi adım adım yönlendiren bir kılavuz ile, öğrenmesi kolaydır, pratikte kullanım için kolaylaştırılmış ve optimize edilmiştir. Güvenilirliği ve sağlam özellikleriyle tanınan exocad'in **"türünün en iyisi"** laboratuvar yazılımı ile aynı kanıtlanmış teknolojiye sahiptir. Exocad'in ChairsideCAD'i yalnızca birkaç adımda, minimum tasarım sonrası işlem ile son derece estetik tasarımlar oluşturmanıza olanak tanır.


ChairsideCAD ile ağız içi tarayıcınızdan en iyi şekilde yararlanın. Açık platformumuz sayesinde çok çeşitli tarayıcılar, üretim sistemleri ve materyalleri desteklenmektedir. Muayenehanenizde üretilmeyen vakalar için, seçtiğiniz laboratuvarla kolayca iş birliği yapabilmeniz için entegre iletişim platformu dentalshare'den yararlanabilirsiniz.

Diş hekimliği uygulamaları için exocad'in benzersiz açık mimari yazılım çözümü olan ChairsideCAD'i keşfedin. Bu yazılım, aynı gün tedavileri için size en yüksek esnekliği, kullanılabilirliği ve performansı sunmaktadır.

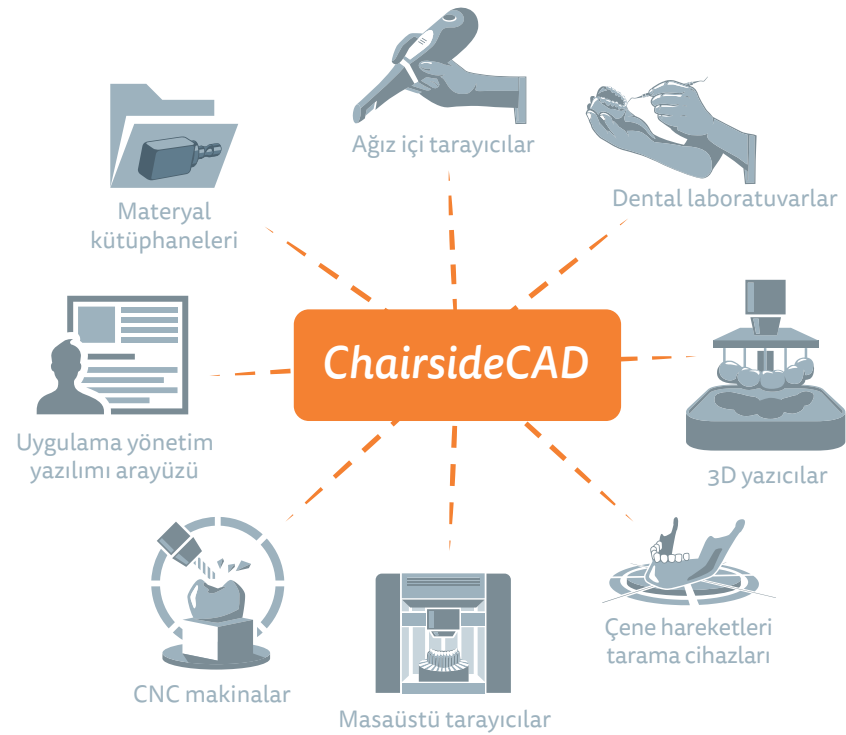

Laboratuvarlar ve açık sistemler ile iletişim kurabilirsiniz

Dış hekimliğinde aynı gün tedavileri için sezgisel yazılım çözümü olan exocad'ın ChairsideCAD yazılımı ile dental tedavilerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Çeşitli pazar lideri ağız içi tarayıcılar ile sorunsuz entegrasyondan güvenilir, son derece estetik tedavisel tasarımlar, klinik içi veya laboratuvar üretimine kadar, ChairsideCAD sizi tüm süreç boyunca adım adım yönlendirmektedir. Düzenli, sezgisel klinik içi iş akışından maksimum derecede yararlanarak hastalarınızın aynı gün tedavi taleplerini karşılayabilirsiniz. Dental muayenehanenizde yalnızca birkaç adımda doğrudan güvenilir sonuçlar elde edebilirsiniz - kapsamlı bir eğitim gerekmez.

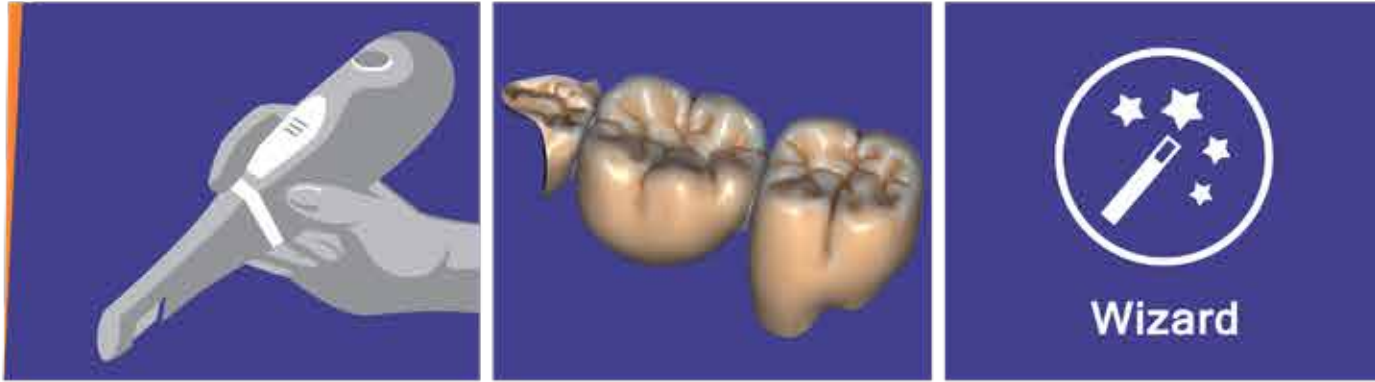

Uyumlu - çok sayıda ağız içi tarayıcıyı destekler

Hastanızın 3D taramalarını birçok açık ağız içi tarayıcıdan kolayca ChairsideCAD'e yükleyebilirsiniz. Standart data formatları sayesinde, tarayıcınızı özel ihtiyaçlarınıza göre seçme ve değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz.

Çok yönlü - Aynı gün tedavileri için geniş endikasyon yelpazesi sunar

Kronlar, köprüler, kopingler, veneerler, inleyler, onleyler, pontikler, provizyonlar, çıkarılabilirler ve plaklar gibi güzel ve fonksiyonel dental restorasyonlar tasarlayın.

Kullanıcı dostu - Wizard modunda kılavuzlu iş akışları bulunmaktadır


Size maksimum kullanım kolaylığı ve tutarlı sonuçlar sunan ChairsideCAD'in sezgisel, kılavuzlu yönteminden yararlanın. exocad'ın kanıtlanmış Wizard tabanlı iş akışı, CAD/CAM sürecinizin her adımında size rehberlik eder.

exoprint ile 3D baskıyı kolaylaştırın

Dış tedavilerinizi veya plaklarınızı klinik içinde exoprint ile sorunsuz tek bir iş akışıyla kolayca üretebilirsiniz. ChairsideCAD'in bu özelliği, üretim için STL dosyalarını manuel olarak seçmek zorunda kalmadan tasarım dosyalarınızı ve ilgili tüm bilgileri 3D yazıcınızın yazılımına doğrudan aktarmanıza olanak tanımaktadır.



Açık yazılım mimarisi sayesinde mevcut sisteminizi ve materyallerinizi ChairsideCAD'e kolay ve verimli bir şekilde entegre edebilirsiniz. Seçim Sizin!

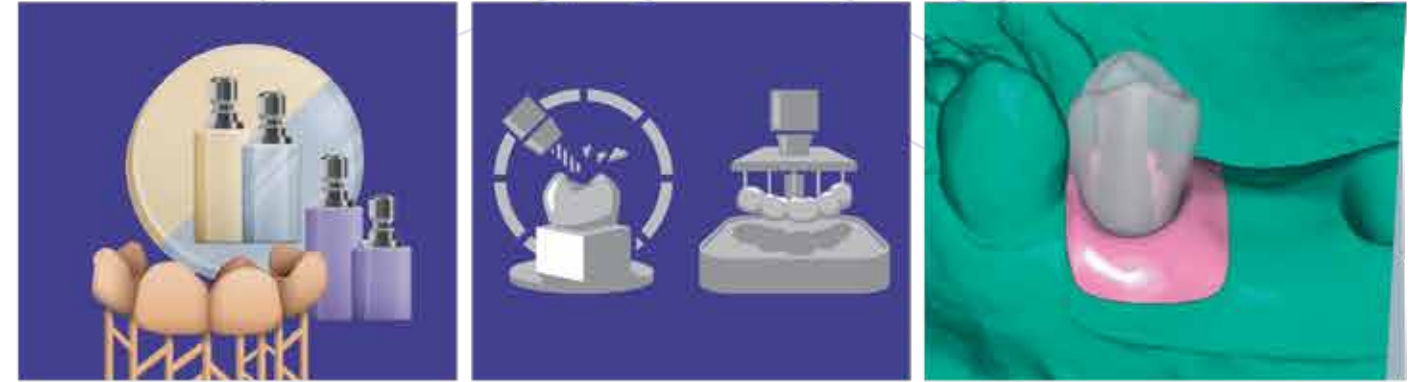

Kapsamlı - üretim materyalleri için açık kütüphane

ChairsideCAD'in 3M, GC, Shofu, Vita gibi önde gelen üreticiler için kapsamlı ve açık materyal kütüphanesine erişerek dental restorasyonlarınızı üretebilirsiniz. Ayrıca hibrit seramik, lityum silikat, lityum disilikat ve cam seramikler için çeşitli üretim blokları mevcuttur.

Özgür seçim - 3. parti üretim ekipmanlarıyla sorunsuz entegrasyon yapabilirsiniz

ChairsideCAD ile donanım yatırımlarınızın getirisini en üst düzeye çıkarın. Açık yazılım mimarisi sayesinde tüm tasarım verileri STL dosya formatında dışa aktarabilirsiniz. Bu özellik, hemen hemen tüm açık 3D yazıcılarda veya CNC makinelerinde restoratif tasarımlarınızı üretmenize olanak tanımaktadır.

Genişletilebilir - tamamlayıcı özellikler ve göstergeler için ek modüller ekleyebilirsiniz

ChairsideCAD'i sizin ve hastalarınızın ihtiyaçlarına göre çeşitli eklenti modülleriyle yükselterek sunduğunuz hizmetleri genişletin ve işinizin değerini artırın.



Tüm çözümler için tek bir yazılım platformu ile sezgisel işletim konsepti

Dental uygulamalarda aynı gün tedavi tasarımlarınız için exocad'ın yazılım çözümü ChairsideCAD en yüksek kullanılabilirlik ve maksimum performans sağlayan sorunsuz dijital iş akışları sunmaktadır. Dünyanın önde gelen laboratuvar tasarım yazılımı olan exocad DentalCAD tabanlı ChairsideCAD, diş hekimlerine maksimum kullanım kolaylığı sunan ve tasarım sürecinde hekimleri optimum şekilde yönlendiren kanıtlanmış ve güçlü bir yazılım platformudur. exocad'ın açık yazılım mimarisi, diş hekimliği uygulamalarının ChairsideCAD'e maliyet ve zaman açısından verimli ve güvenilir sonuçlar elde etmek için iş akışlarına, ekipmanlarına ve hizmetlerine tam olarak uyulanmasını sağlar.



exocad ChairsideCAD Endikasyonları ve İşlevleri




Anatomik Kron

Minimum çabayla güzel ve işlevsel kronlar tasarlayabilirsiniz. Çok sayıda yüksek kaliteli diş kütüphanesi dahildir.




Köprü

İnlay, kantilever ve Maryland köprü içeren anatomik köprü ve altyapı tasarımı yapabilirsiniz.

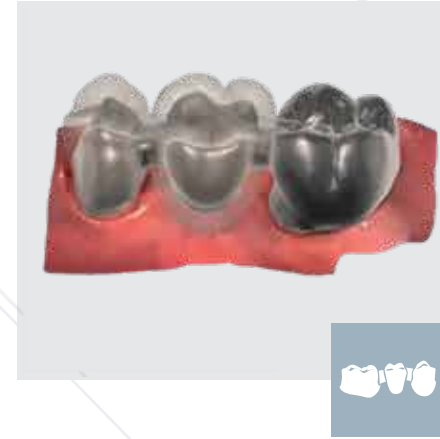

Altyapı

Gömülü iş yapan laboratuvarlar, gelişmiş altyapı tasarım seçeneklerinden yararlanabilirler.

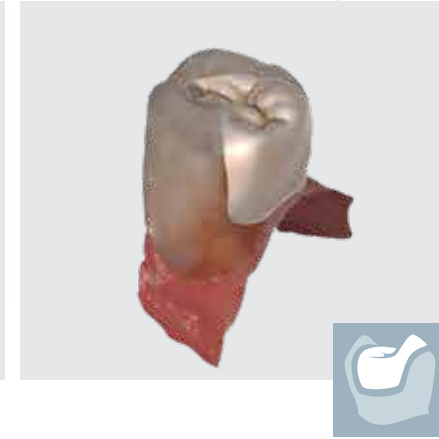

Inley/onley

Doğal görümlü inley ve onlay restorasyonlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde tasarlayabilirsiniz.



Vener

Yalnızca birkaç tıklama ile son derece estetik sonuçlar elde edebilirsiniz. Birçok estetik diş kütüphanesi de dahil edilmiştir.

ChairsideCAD, hasta hala koltuktayken çeşitli estetik ve fonksiyonel dental restorasyonlar ve plaklar tasarlamaya yardımcı olur. Basitleştirilmiş, sezgisel kullanıcı arayüzü ve açık diş ve materyal kütüphaneleri sayesinde yüksek düzeyde otomasyon ve tutarlı sonuçlar sağlar.



dentalshare

Hızlı, güvenli ve kolay veri aktarımı

Diş hekimleri, diş teknisyenleri ve üretim merkezleri arasındaki çok yönlü dijital veri aktarımının tüm yelpazesini kapsamayı amaçlayan dentalshare "laboratuvara data göndermekten" daha fazlasıdır.

dentalshare, dağıtılmış iş akışları ve verimli çevrimiçi işbirliği sağlamaktadır. Güçlü bir transfer protokolüyle birleştirilmiş yeni nesil sıkıştırma teknolojisini kullanıyoruz, böylece büyük veri setleri bile sabit olmayan mobil ağ bağlantılarından ve kısıtlayıcı güvenlik duvarlarından kolaylıkla geçebilmektedir. Örneğin tasarımlar değiştirilip, modifiye edilip veya üretimden önce gözden geçirilebilir. dentalshare'deki tüm transferlerde en gelişmiş şifreleme teknolojisini kullanır ve data alındıktan sonra tamamen doğrulanır.



Transfer başına ücret yok *, komisyon yok

dentalshare ile her transferinizde ayrı bir ücret ödemeyerek kâr marjınızda bir azalma olmayacaktır.

Şeffaflık ve gizlilik

Bir dentalshare kullanıcısı olarak, hangi verilerin ne zaman gönderileceği konusunda tam kontrol sizdedir. dentalshare, kısmen paylaşmak istediğiniz bilgileri de seçmenize ve göndermenize olanak tanır.

Donanımdan bağımsız

dentalshare, piyasadaki en geniş CAD/CAM donanım ve yazılım yelpazesine entegre edilmiştir. İş ortaklarınız tarafından kullanılan diğer ürünlerden bağımsız olarak, dentalshare ile güvenilir bir şekilde bağlanabilirsiniz.

* Adil kullanım politikasına tabidir



Kapsamlı, çok yönlü, entegre Çok sayıda eklenti modülü sayesinde gelişmiş seçenekler ve hizmetler

exocad eklenti modüllerinden bir yada birden fazlasıyla hizmet tekliflerinizi kolayca genişleterek değişen pazar ve hasta taleplerini karşılayabilirsiniz. Hasta memnuniyetini artırırken tedavi sürelerini ve ziyaret sıklığını önemli ölçüde azaltın.

Tüm modüller, ChairsideCAD'e tamamen entegre edilmiştir ve size tek bir sorunsuz, istikrarlı ve kusursuz iş akışı sağlar. Gereksinimlerinize göre, restoratif tasarımlarınıza artikülasyon veya çene hareketlerini dahil etmenizi sağlayan çeşitli fonksiyonel modüller arasından seçim yapabilirsiniz. Veya tasarım süreciniz esnasında CT veri görüntüleri, gerçekçi restorasyon görüntüleri veya önizlemeler gibi gelişmiş görselleştirmelerden yararlanabilirsiniz.



Implant Modülü*

Abutmentler, vidalı kron ve köprüler tasarlayabilirsiniz.

➤ sayfa 12/13



Model Creator

Dijital ölçü taramalarından fiziksel modeller oluşturabilirsiniz.


➤ sayfa 14/15



Isırma Plağı Modülü

Gece plakları tasarlayabilirsiniz.

➤ sayfa 16

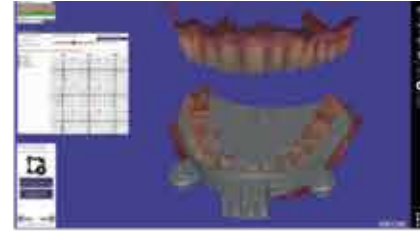

Çene Hareketleri içe aktarımı

Birçok çeşit cihazlardaki çene ölçülerini içe aktarabilirsiniz.

➤ sayfa 21



DICOM Görüntüleyici

Tasarım sürecinde voksel CT verilerini görselleştirebilirsiniz.

➤ sayfa 22



TruSmile Modülü

Dental restorasyonların gerçekçi görünümü.

➤ sayfa 23



Geçici Modülü

Kesim öncesi tarama için eggshell geçicileri oluşturabilirsiniz.


➤ sayfa 17



Smile Creator

Estetik restorasyonlarınızı tahmin edilebilir şekilde planlayıp ve önceden görüntüleyebilirsiniz.


➤ sayfa 18/19

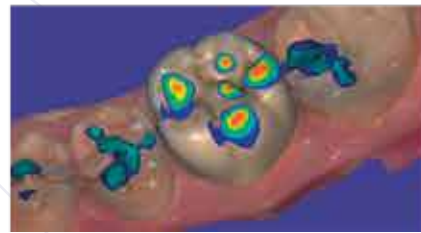

Otomatik Artikülatör Modülü

Tam doğru dinamik oklüzyon için çene hareketlerini otomatik olarak simüle eder.

➤ sayfa 20

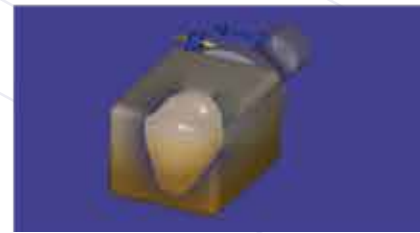

CAD'de Planlama Modülü

Restorasyonlarınızı kazıma bloklarına konumlandırın.

➤ page 24




Eklenti Modülü: **İmplant Modülü***

İmplant bazlı restorasyonlar tasarlayın


ChairsideCAD'in *İmplant Modülü* ile, doğrudan vidalı kron ve köprülerin yanı sıra custom abutmentler tasarlayabilirsiniz. Tek bir CAD oturumunda abutment ve üst yapılar tasarlamak bile mümkündür. Ayrıca açılı vida kanalları da desteklenmektedir.

İmplant Modülü ile seçim sizin! İşlerinizi ister kliniğinizde üretin ister dosyalarınızı dışarı göndererek ürettirin. Eklenti modülü, çok çeşitli klinik içi üretim sistemlerini desteklemektedir. Ek olarak, önde gelen üretim merkezleri exocad yazılımı tarafından oluşturulan dosyaları kabul etmektedir.

*Not: ChairsideCAD *İmplant Modülü* 510(k) beklemededir ve ABD'de mevcut değildir.

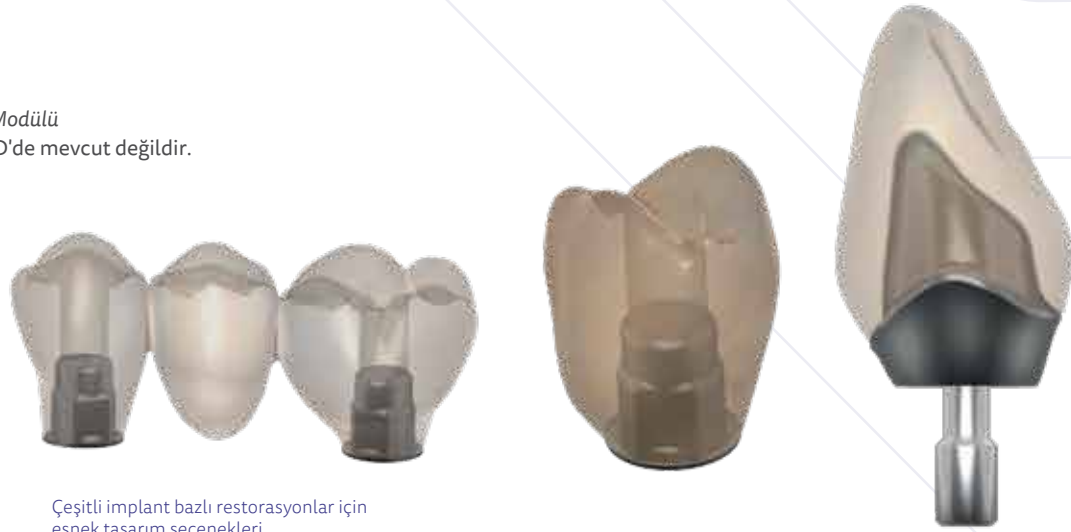


Çeşitli implant bazlı restorasyonlar için esnek tasarım seçenekleri

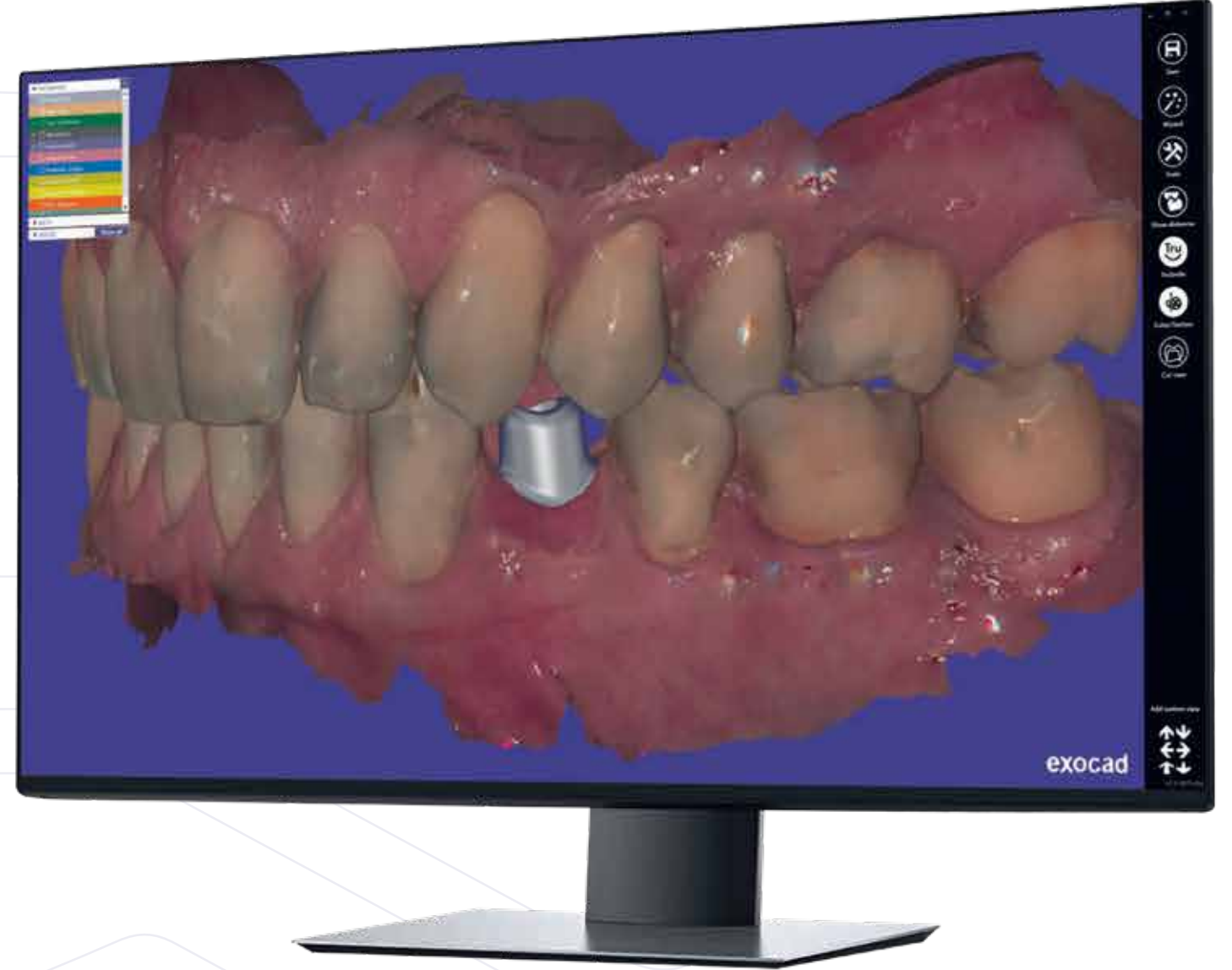

Hızlı ve kolay kullanım

Kendini kanıtlamış exocad Wizard, tasarım sürecinin farklı adımlarında da size rehberlik eder.

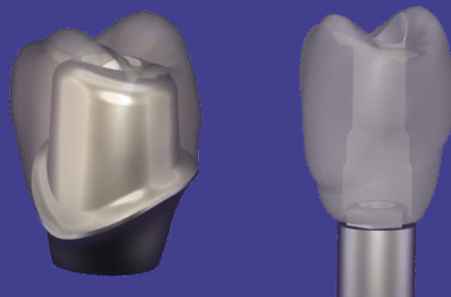

Çok çeşitli implant kütüphaneleri

exocad'ın *İmplant Modülü*, kapsamlı bir implant kütüphane setiyle birlikte gelmektedir ve en üst düzey implant üreticilerinden küçük yerel üreticilere kadar çok çeşitli implant sistemlerini desteklemektedir. Üçüncü taraf üreticilerden seçim yapabileceğiniz titanyum bazlı daha geniş bir yelpaze de vardır. Ayrıca, birçok milling merkezi exocad'ın *İmplant Modülü* için özel kütüphaneler sağlamaktadır.

[exocad.com/library-integration](https://www.exocad.com/library-integration)




Ekleri Modülü: **Model Creator**

Dijital ölçü taramalarından fiziksel modeller oluşturun


exocad'ın **Model Creator** modülü, ağız içi tarama verisinden veya ölçü kağıdı taramasından fiziksel modeller oluşturmanıza yardımcı olur.

Hem çıkarılabilir segmentlere sahip modellerin tasarımı (önceden üretilmiş altyapılar kullanıldığında) hem de monolitik modellerin tasarımı (hazırlanan güdük ne çıkarılabilir nede ek parçalara sahip olduğu durumlarda) desteklenmektedir.

İmplant Modülümüz ile birlikte **Model Creator**, laboratuvar analogları ve çıkarılabilir diş eti maskeleri ile modeller oluşturmanıza olanak sağlamaktadır.

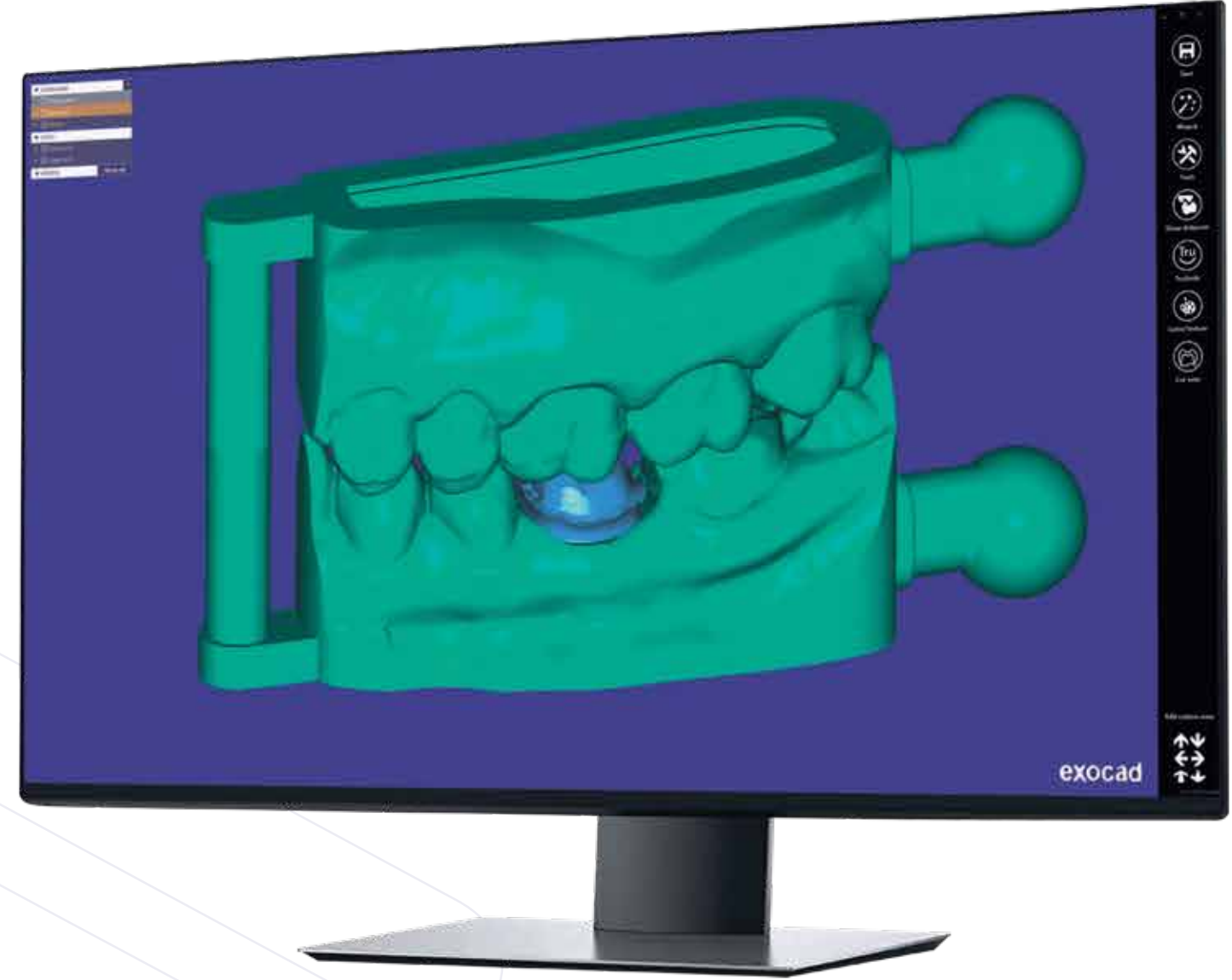


Bir eklenti modülü - birçok olasılık

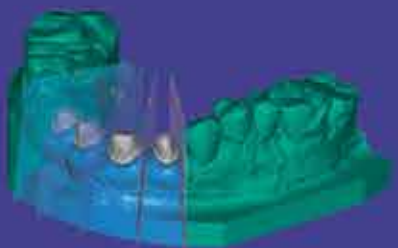


Çıkarılabilir segmentli model



Farklı model/üye stilleri mevcuttur

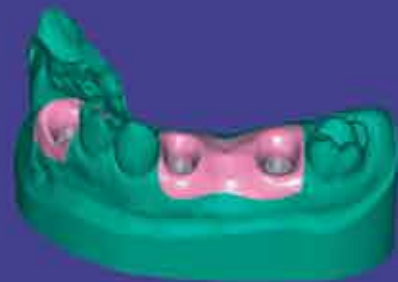

İmplant analogları ile modeller oluşturabilirsiniz

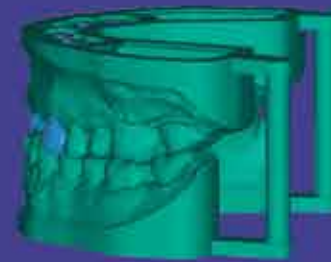

Alt, üst ve tam çene modelleri



Modelleri etiketleme



İçerik boş modeller, son derece uygun maliyetli üretime olanak tanımaktadır



Eklenti Modülü: **Bite Splint Modülü**


Gece plakları tasarlayın

Exocad'ın Bite Splint Modülü ile yalnızca birkaç adımda yüksek kaliteli tedavi edici gece plakları tasarlayabilirsiniz.

Kullanımı kolay isteğe göre uyarlama araçları ve tasarım sürecinde size rehberlik eden sezgisel iş akışı sayesinde ısıрма plakları üretmek artık daha basit ve daha karlı. Kendi ısıрма plaklarınızı oluşturarak hastalarınıza temporomandibular eklem ağrıları için hızlı rahatlama ve tek seanslık çözümler sunun.

Eklenti modülünün kapsamlı işlevselliği, oklüzyonu sanal olarak ayarlamanıza ve istenmeyen fazlalıkları kaldırmanıza olanak sağlamaktadır. Ayrıca, gece plaklarınızın yüzeyini tek tek düzleştirebilir ve biçimlendirebilir veya arka oklüzal yüzey için otomatik düzeltme seçeneğini seçebilirsiniz. Tasarımlarınıza logonuzu ve sloganınızı ekleyerek hasta memnuniyetini artırın ve marka kimliğinizi öne çıkarın.

En iyi sonuçlar için **Bite Splint Modülü** ile **Sanal Artikülasyon** modülünün kombinasyonunu kullanmanızı öneririz.

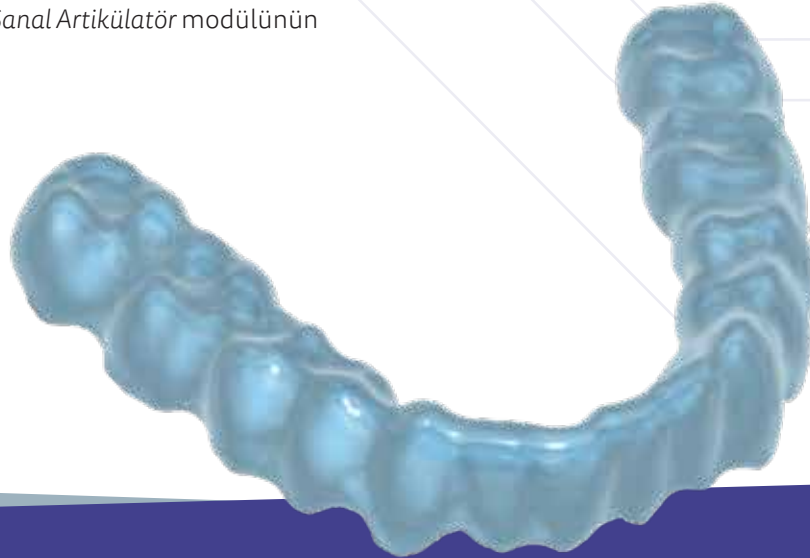

Direk Üretim

Exocad'ın açık yazılımını kullanarak hastalarınız için tek seanslık tedavi çözümleri sağlayabilirsiniz. Doğrudan, herhangi bir uyumlu ve açık CNC makinesi veya 3D yazıcı ile özel tasarlanmış tedavi edici gece plakları üretin.



Eklenti Modülü: **Provizyonel Modülü**

Ön hazırlık taramalarından eggshell geçicileri oluşturun

Hastanızın ziyaretinden önce eggshell tekniğini kullanarak geçici kronlar ve köprüler oluşturun.

exocad'ın **Provizyonel Modülü**, hastanın tedavi öncesi anatomisine göre geçiciler oluşturmanıza olanak sağlar. Alternatif olarak, kütüphanenizi kullanarak provizyonel kron veya köprü oluşturabilirsiniz. Ardından kapsamlı olan serbest biçimlendirme araçlarını kullanarak ince düzeltmeler yapabilirsiniz. Modül içinde yeni diş morfolojilerini klinik olarak değerlendirilebilirsiniz, bu da koltuk süresini kısaltmanıza yardımcı olur.






Eklenti Modülü: *Smile Creator*

CAD'de Gülüş Tasarımı

Smile Creator ile tasarımlarınıza değer katacağınız - öngörülebilir estetik gülüş makyajları için exocad'ın yenilikçi, CAD'de gülüş tasarımı çözümünü kullanın. *ChairsideCAD* platformuna entegre olan *Smile Creator*, yenilikçi 2D/3D teknolojimiz sayesinde güvenilir bir şekilde protez olarak uygulanabilir estetik tasarımlar oluşturmanıza olanak tanımaktadır.


Hastanın fotoğrafları, ana hatları ve 3 boyutlu durumları birleştirilerek dişler, gülümseme ve yüz arasındaki estetik ilişkiler değerlendirilebilir. Hasta fotoğrafları otomatik olarak 3 boyutlu nesnelere dönüştürülmektedir ve bunlar daha sonra dişlerin 3 boyutlu taramalarıyla eşleştirilmektedir. Bu durum, diş hekimlerine ve diş teknisyenlerine restoratif bir tedavi planı için gerçekçi bir bakış açısı sunmaktadır. Elde edeceğiniz sonuç için yüksek oranda kontrole imkan tanınmasına ek olarak, diş laboratuvarları, diş hekimleri ve hastalar arasındaki iletişimi de geliştirmektedir.

Kılavuzlu iş akışları ve kapsamlı özellikleri sayesinde *Smile Creator*, kozmetik diş hekimliği için sezgisel ve güçlü bir dijital planlama çözümüdür.

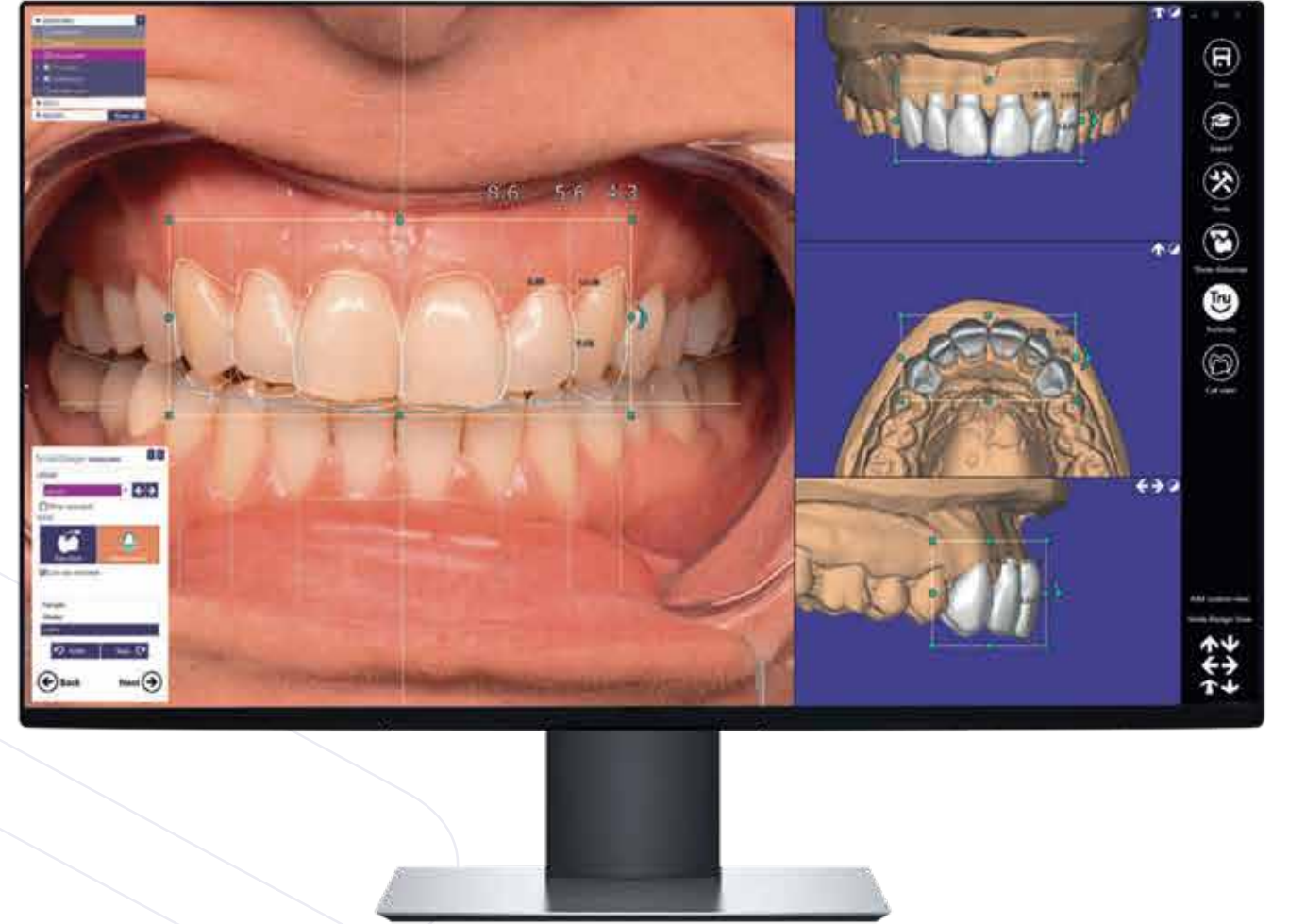

Protez uygulama için mükemmel bir altyapı


Smile Creator'un mükemmel altyapısı ile, *ChairsideCAD*'de protez uygulamalarının yanı sıra *exoplan*'da implant planlaması için gerçek bir 3D diş kurulumu elde edersiniz. Dijital mum modeller, exocad'ın *Model Creator* modülü ile uygulanabilir.

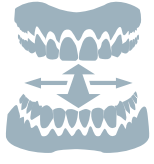

Eklenti Modülü: **Otomatik Artikülatör Modülü** Restoratif tasarımlarda artikülasyonu simüle edin

Otomatik Artikülatör Modülü, gerçek bir artikülatörün hareketlerini simüle etmenizi ve hastaya özel dinamik oklüzyon elde etmenizi sağlar.

ChairsideCAD'de artikülatör hareketleri Wizard iş akışı aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilir. Anatomik ortalamaları kullanan yazılımımız, tarama verilerini konumlandırmak ve çene hareketlerini otomatik olarak simüle etmek için buluşsal yöntemler kullanır. Bulunan sonuçlar, oklüzyonu dijital olarak ayarlamak ve dolayısıyla da koltuk süresini kısaltmak için kullanılır.

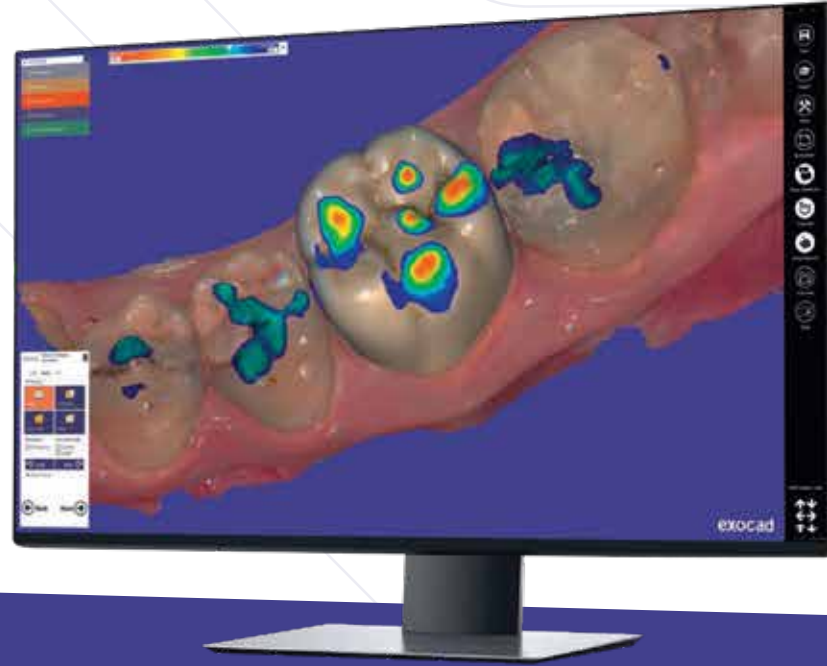

Optimize edilmiş iş akışları için kapsamlı işlevler

Otomatik Artikülatör eklenti modülü ile, hastanızın dijital ölçülerini ve önceden tanımlanmış parametreleri hesaba katarak, düzensiz hareketleri kolayca hesaplayabilirsiniz. Basit kullanıcı kontrolleri, hesaplanan hareketleri dört standart yönde görselleştirmenize yardımcı olur: protrüzyon, retrüzyon, sol laterotrüzyon ve sağ laterotrüzyon. Restorasyon tasarımınızın karşıt dişlere karşı temas gücünü belirleyebilirsiniz.






Eklenti Modülü: **Çene Hareketleri İçer Aktarımı** Başka cihazlardan alınan çene ölçülerini içer aktarın

Çene hareketleri içer aktarımı modülü, Zebris'ten JMA sistemi gibi harici cihazlardan çene hareketi kayıt verilerini içer aktarmanızı sağlamaktadır.

Bu eklenti modülü, **Otomatik Artikülatör modülü**yle birlikte çalışmaktadır.

Uzmanlar için: Yenilikçi, yarı dinamik fiziksel modeller oluşturmak için **Model Creator** modülü ile birlikte kullanınız.

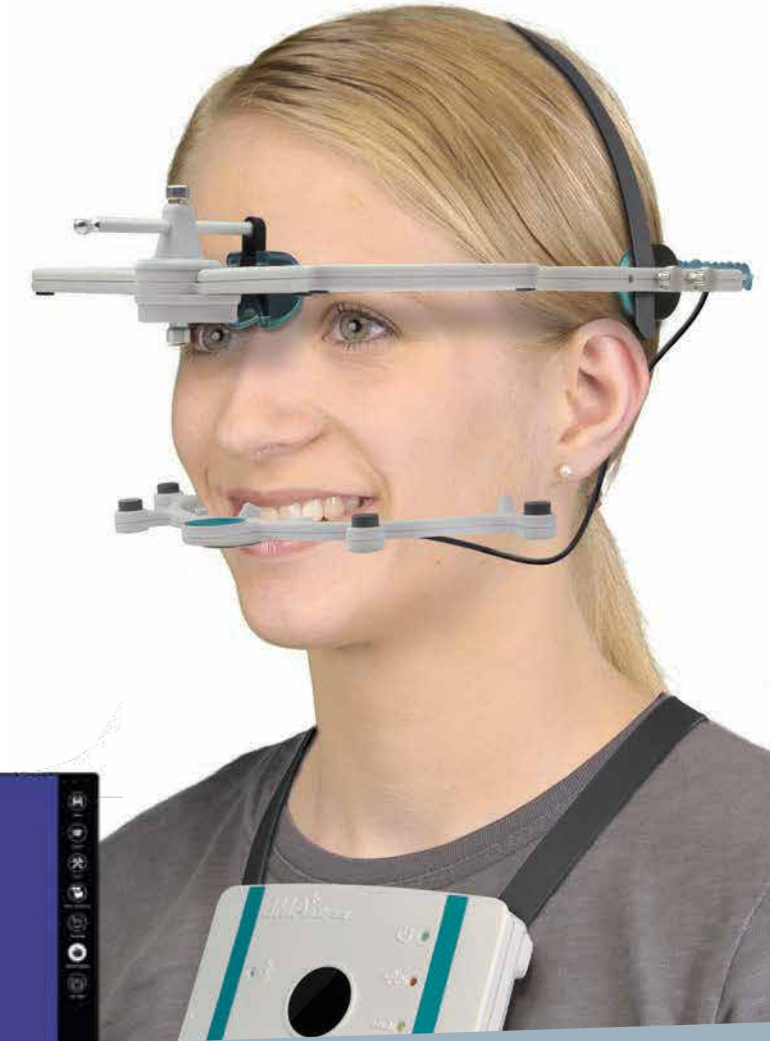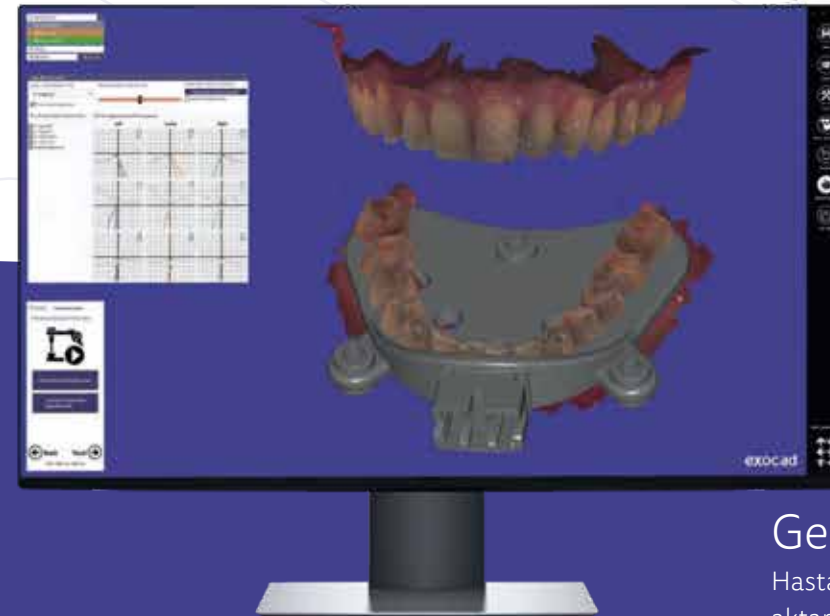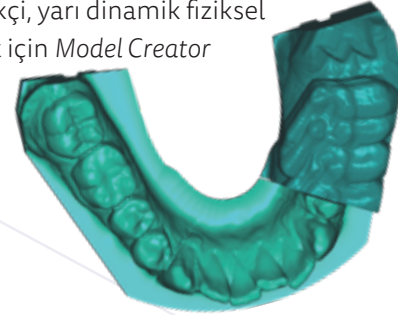

Gerçekçi Görüntüleme

Hastanın gerçek, dinamik çene hareketlerini yazılıma aktarın ve onları tasarım sürecinde simüle ederek kişiye özel restorasyonlar oluşturun.




Eklenti Modülü: **DICOM Görüntüleyici**


Tasarım sürecinde voksel CT verilerini görselleştirebilirsiniz

exocad'in ChairsideCAD yazılımı, dental restorasyonların tasarımı sırasında CT makinelerinden gelen voksel verilerini görselleştirmenize olanak tanıyan opsiyonel bir **DICOM Görüntüleyici*** içermektedir.

Büyük CBCT dosyalarının yüksek hızda işlenmesi konusunda heyecanlanın. Çünkü optimize edilmiş veri işleme algoritmaları ve hızlı grafik oluşturma ile yönlendirilen exocad'in **DICOM Görüntüleyicisi**, sektördeki en hızlı DICOM yükleme ve görselleştirmeyi sağlamaktadır.

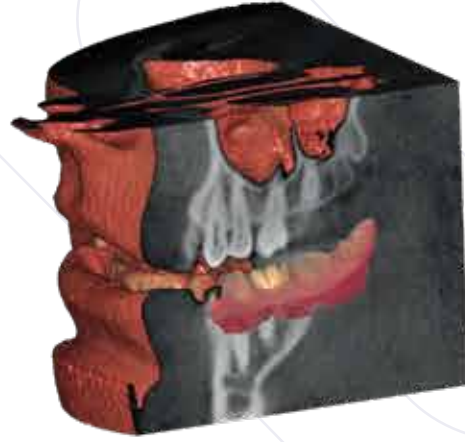

*Not: DICOM Görüntüleyici tanı/ tıbbi amaçlar için değildir.


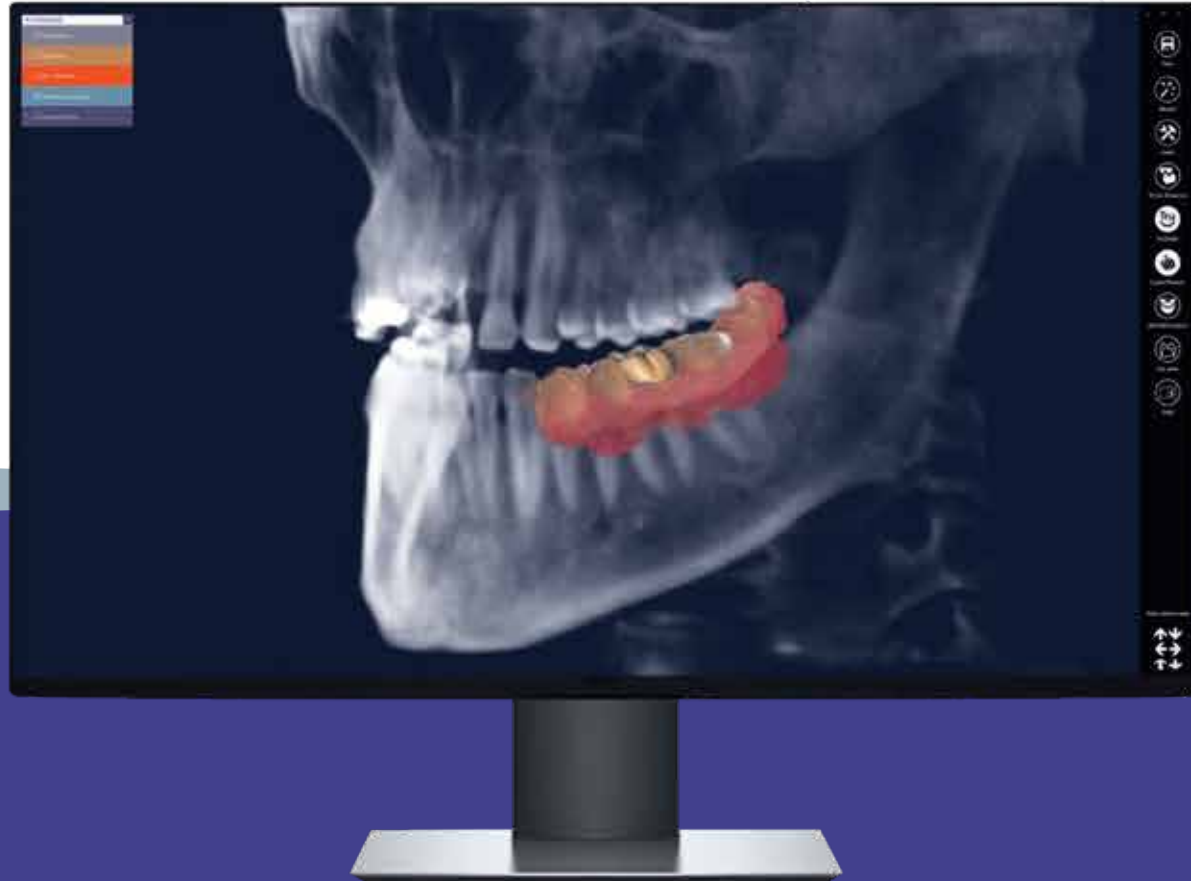


Eklenti Modülü: **TruSmile Modülü**

Dental restorasyonların gerçekçi görünümü

exocad'in **TruSmile Modülü**, tasarım sürecinde gerçek zamanlı olarak dental restorasyonların neredeyse gerçek görünümünü görselleştirmektedir.

TruSmile, "Ne Görüyorsanız Onu Alırsınız" kullanıcı deneyimi sağlamanın yanı sıra, klinik içi CAD/CAM sistemi kullanan hekimler için güçlü bir pazarlama aracıdır, ör. hastayı metal bir kron yerine seramik restorasyonu tercih etmeye ikna etmenize yardımcı olur.

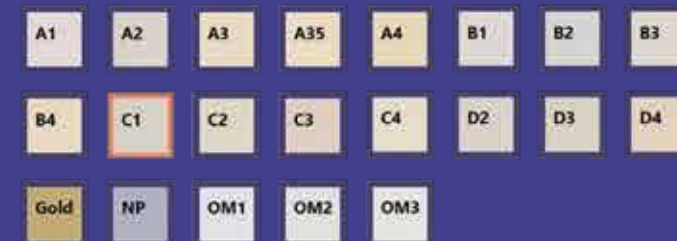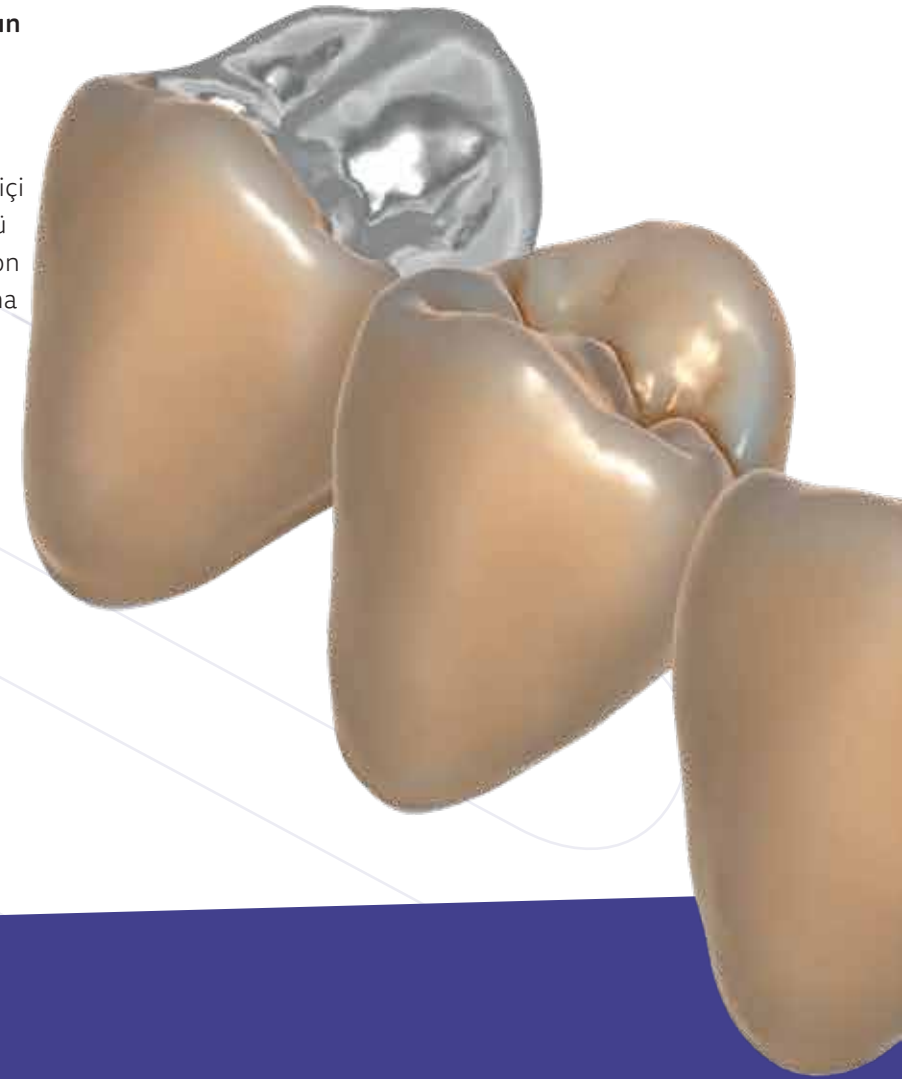

Doğal renklendirme

Tek diş standart renk ön ayarlarından birini seçin ve bunları gerçekçi bir sonuç önizlemesi için ayarlayın.



Eklenti Modülü: **CAD'de Planlama Modülü**

Tasarımlarınızı uygun kazıma bloklarına yerleştirin

exocad'in CAD'de Planlama eklenti modülü, tasarım süreciniz sırasında restorasyonlarınızı kazıma bloklarına hızla yerleştirmenize yardımcı olur.

Interactively place single-or multi-unit restorations in a suitable milling blank. Create reliable outcomes by exporting the information for further processing in CAM software. In combination with the *TruSmile* add-on module, you can easily adjust the position and shading of your restoration in a multi-layered blank – in the context of its adjacent teeth.



Kazıma Yöneticisi Aracı

Önde gelen makine üreticileriyle yakın işbirliği sayesinde exocad *ChairsideCAD*, tek seanslık diş tedavisi üretimi için çeşitli kazıma makineleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır. *Kazıma Yöneticisi*mlle birlikte CAD'de Planlama, seçtiğiniz bir klinik içi kazıma makinesi ile sorunsuz entegrasyonun anahtarıdır. *Kazıma Yöneticisi* ile makine kontrollerinize kolayca erişebilirsiniz ve üretim sıralamanızı yönetebilirsiniz.

exocad.com/integration/chairside adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Seçme özgürlüğü

ChairsideCAD ile esnekliğinizi en üst düzeye çıkarın

Diş hekimliği, yalnızca diş laboratuvarlarında değil, aynı zamanda klinik uygulamalarında da yükselişte olan dijital teknolojiler sayesinde temel değişiklikler yaşamaktadır. Dijital çözümler daha fazla üretkenlik, üstün klinik sonuçlar ve yüksek hasta memnuniyeti sağlarken, yeni dijital iş akışlarına yatırım yapmanın elbette bir bedeli var. exocad olarak iş akışlarınız, ekipmanınız veya hizmetleriniz söz konusu olduğunda size maksimum esneklik sunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle *ChairsideCAD*, diş hekimliği uygulamalarınız için açık, satıcıdan bağımsız bir yazılım çözümüdür ve tek seanslık diş tedavilerinin tüm dijital iş akışını kapsayan sorunsuz entegrasyonları garanti eder.

ChairsideCAD'in benzersiz açık mimari yapısı, ekipmanınızı seçme konusunda size tam bir özgürlük verir. Tercih ettiğiniz ağız içi tarayıcılarla hastanızın tarama verilerini sorunsuz bir şekilde içe aktarabilirsiniz. Güzel doğal dişlerden oluşan kapsamlı bir kütüphaneye erişebilir ve malzemelerinizi önde gelen markalardan veya çeşitli genel bloklardan birini seçebilirsiniz. Güvenli çevrimiçi iletişim platformumuz sayesinde, tercih ettiğiniz laboratuvar ile işbirliği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Eğer klinik içi üretimi tercih ediyorsanız, *ChairsideCAD* hemen hemen tüm açık CNC makineleri ve 3D yazıcılarla kolayca entegre olmaktadır.

ChairsideCAD'i tercih edin! Seçim özgürlüğünün tadına varın!



Kapsamlı materyal kütüphanelerine erişin

Hibrit seramik, lityum silikat, lityum disilikat, cam seramik vb. kazıma için önde gelen üreticilerin açık kazıma blokları kütüphanesinden veya kendi sistemine has bloklardan seçim yapabilirsiniz.

Özet Olarak

Uzmanlar neden dijital diş hekimliği çözümlerimize güveniyor?



Daha hızlı iş akışları, gelişmiş uzmanlık

Büyük ve karmaşık vakalarla uğraşırken bile sağlam şekilde çalışan yüksek performanslı yazılımla çalışarak zamandan tasarruf edin. Hızlı yanıt süreleri ve optimum kullanılabilirlik, günlük işlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olur.



İtimat edebileceğiniz bir güvenilirlik

Sürekli olarak takdir edeceğiniz ve bundan kâr elde etmeye devam edeceğiniz bir yazılım oluşturma konusunda bize güvenebilirsiniz. Ürünümüz istikrarını defalarca kanıtlamıştır, çünkü kaliteye ve detaylara her zaman en büyük önemi veriyoruz. Güvenilir güncelleme ve yükseltmelerimiz, her zaman ihtiyaçlarınız tarafından yönlendirilen yeni olanaklar sağlar.



Kullanımı ve yüksek beklentilerinize ulaşmak kolaydır

Sizin gibi diş hekimliği uzmanlarıyla yakın çalışma ve dijital çağ için daha erişilebilir dental yazılım oluşturma deneyimimiz sayesinde karmaşık prosedürleriniz daha basit ve verimli hale gelir.



Bağımsız ve yenilikçi

Yazılımımız sizi yeniliğin ön saflarına taşır. Kuruluşumuzdan bu yana, kendini adanmış mühendis ve araştırmacı ekibimiz, diş endüstrisi için sürekli olarak son teknoloji yenilikler geliştirmiştir. Bağımsız ve tarafsız donanım teknolojisi sağlayıcısı olarak amacımız, yazılım çözümleri aracılığıyla dijital diş hekimliğinin sınırlarını zorlamaktır.



İhtiyaç duyduğunuz esneklik

Exocad'in modüler ve açık yöntemiyle maksimum esneklik ve özgürlüğü yaşayın. exocad'in sadece yazılımı değil, iş modeli de esnek. Modülleri istediğiniz gibi karıştırıp seçebilirsiniz - hepsi sizin seçiminiz.



Tamamen geleceğe dönük

Üçüncü taraf tarayıcıları, kazıyıcıları, printerları ve malzemeleri kullanan en geniş entegre çözüm seçeneklerine sahip dental CAD/CAM yazılım sağlayıcısıyız. Müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve aşmak için her zaman yeni fikirlere açık ve hem bugünün hem de yarının en iyi çözümlerini desteklemeye hazırız.

exocad ve ChairsideCAD Bir bakışta avantajlarınız

Kullanım kolaylığının tadını çıkarın

ChairsideCAD hızlı ve kullanımı kolaydır, kapsamlı bir eğitim almanız gerekmez.

Hasta memnuniyetini artırın

ChairsideCAD, diş hekimliğinde tek seanslık tedavileri gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Estetik ve fonksiyonel restorasyonlar oluşturun

ChairsideCAD'i öğrenmesi kolaydır ve işlem boyunca sizi adım adım yönlendirmektedir.

Verimliliğinizi artırın

ChairsideCAD, hastanın muayenehanedeki tek bir seansı sırasında restoratif diş hekimliğini gerçekleştirmenizi sağlar.

Klinik içi veya dış kaynaklı laboratuvar üretimini tercih edin

ChairsideCAD esnek iş akışı sunar.

Esnekliğinizi koruyun

ChairsideCAD, kliniğinizdeki iş akışında, ekipmanda veya hizmetlerde yaptığınız hemen hemen tüm değişiklikleri destekler.

Ortaklarınızla zahmetsizce işbirliği yapın

ChairsideCAD geliştirilmiş ve öngörülebilir sonuçlar için laboratuvarlar ve üretim merkezleri ile iletişiminizi kolaylaştırır.

Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarın

ChairsideCAD seçtiğiniz açık donanım ve malzemeleri entegre etmenizi sağlar.

Mevcut ekipmanınızla çalışın

ChairsideCAD açık tarayıcılar, CT makineleri, 3D printerlar ve CNC makineleri dosya formatlarını desteklemektedir.

Hizmet yelpazenizi genişletin

ChairsideCAD ihtiyaçlarınıza göre çeşitli eklenti modülleri ile yükseltilebilir.

Sınırsız sayıdaki vakadan kar elde edin

ChairsideCAD'in hiçbir gizli maliyeti veya tıklama ücreti yoktur.

Kendini kanıtlamış yazılım platformumuzdan yararlanın

DentalCAD, ihtiyaçlarınıza göre çeşitli eklenti modülleri ile yükseltilebilir

Kendini kanıtlamış yazılım platformumuzdan yararlanın

exocad yazılımı 10 yıldır kullanılmaktadır.

exocad'dan dental CAD yazılımı

exocad, tamamen açık ve bağlantılı olma ilkesiyle kuruldu. Dental CAD yazılımında dünya çapında lider OEM üreticisi olarak, temel yetkinliğimiz birlikte çalışabilirlik standartları oluşturmaktır. Üreticiler böylelikle veritabanlarını, ürünlerini, kütüphanelerini ve hizmetlerini entegre edebilirler. Bu entegrasyonlar, biz desteklenen endikasyonların derinliğini genişletmeye devam ederken, şirketlerin ana işlerine odaklanmalarına olanak tanır.



Headquarters Germany

exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Germany

Tel: +49 61 51 / 629 48 90
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

America

exocad America, Inc.
7 Wheeling Ave, Suite 1
Woburn, MA 01801
USA

Tel: +1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223)
Fax: +1 617 - 963 - 1506
info@us.exocad.com

Benelux

exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxembourg

Tel: +352 278061456
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Asia

exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui Kowloon
Hong Kong

Tel: +852 - 375 24 160
Fax: +852 - 375 24 036
info@asia.exocad.com

UK

exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
UK

Tel: +44 1642 843 016
info@exocad.com

High
Quality
Dental
Solutions

Onex Dental Tic. Ltd. Şti.

19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad.
Gümülcineli Apt. 16/9
34363 Şişli - İSTANBUL
Tel : +90 212 231 03 20 - 231 03 26
Fax: +90 212 231 02 80
info@onexdental.com
www.onexdental.com

     onexdental