

Pro 2

DENTAL 3D PRINTER

VERİMLİLİK HASSASİYETLE BULUŞUYOR



35µm
KESİNLİK

15+
İŞAKIŞLARI

4x
VERİM

T A N I T I M

Pro 2 3D Printer

Pro 2, diş hekimliğinde en verimli 3D yazıcı olmak üzere sıfırdan tasarlanmıştır.

Reçine Tankı

385 nm Işık Modülü

Kullanıcı Odaklı Dokunmatik Ekran

Reçine Okuyucu

35 µm Hassasiyet


Patentli Optik Panel teknolojisi, Pro 2'ye sektör lideri çözünürlük kazandırıyor.

4 kat daha yüksek verim

Tek seferde 6 adede kadar diş arka yazdırın veya baskı hızını 2 katına çıkarmak için Arch Kit'i kullanın.

15+ İş Akışı

Gece koruyucuları, kuronlar, aligner modelleri, cerrahi kılavuzlar, implant protezleri, retainer ve daha fazlasını yazdırın.

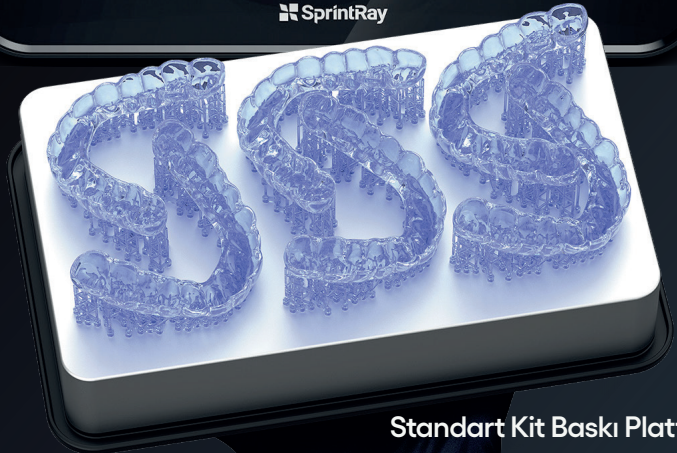

Standart Kit Baskı Platformu

Işık Önemlidir

Pro 2, patentli Optik Panel teknolojisi ve 385 nm UV-A ışık modülü 3D baskıda devrim yaratıyor. Bu kombinasyon, Pro 2'nin karmaşık geometrileri ve detaylı tasarımları işleyebilmesini sağlayarak olağanüstü detay ve sağlamlığa sahip parçalar üretmenize olanak tanıyor. Pro 2 ile, teknolojinin her seferinde üstün sonuçlar verdiğini bilerek zorlu projelerin üstesinden güvenle gelebilirsiniz.



Standart Kit


Maksimum verim, 4 kat daha büyük baskı alanı

Arch Kit

Maksimum hız 2 kat daha hızlı

Esnek Üretim

İhtiyaçlarınıza uygun baskı hızı için Arch Kit'i veya 6'dan fazla ark sığdıran Standard Kit'i tercih ederek iş akışınızı optimize edin.

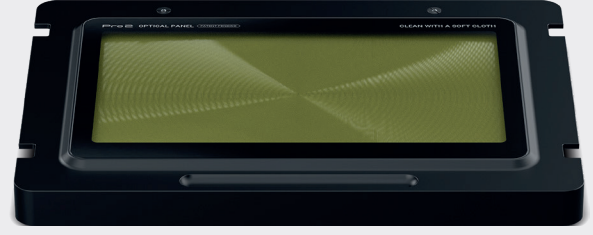

Optik Panel

Piksel Mükemmel Doğruluk

İnanılmaz anatomik detaylar: Pro 2, sıfır bozulma için doğrudan tankın altına yerleştirilmiş, değiştirilebilir, patent başvurusu yapılmış 35 µm çözünürlüğe sahip bir ışık modülü olan Optik Panel ile çalışır.



UV-A Işığı

Biyomalzeme inovasyonunun geleceği: Son derece güçlü 385 nm LED, %96 ışık homojenliği ve geliştirilmiş mekanik özelliklerle 4 kat daha fazla kürleme derinliği kontrolü ve ideal foto başlatıcı emilimi sunar.



Kullanıcı merkezli

Yepyeni bir kullanıcı arayüzüne sahip ultra geniş 12 inç dokunmatik ekran, yazdırma iş akışınızı yönetmenize yardımcı olur. Dahili barkod okuyucu, tıbbi cihaz takibi sağlar.

Eksiksiz Diş Hekimliği 3D Baskı Ekosistemi


TSprintRay ekosisteminin tamamı, otomatik yapay zeka tasarımı, doğru baskı ve kolay son işlem özelliklerini içerir; böylece minimum eğitimle taramadan baskıya bir saatten kısa sürede geçebilirsiniz.



PRO WASH S

PRO 2 PRINTER

NANOCURE

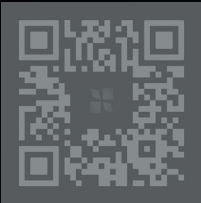

Dijital Diş
Hekimliğinde
Bir Sonraki Adımınız
Burada.

**Hemen bir demo
randevusu ayarlayın!**

 **SprintRay**

Brunnenweg 11
64331 Weiterstadt
Germany
www.sprintray.com
info.eu@sprintray.com

 **OnexDental**
— TECHNOLOGY —

19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad.
Gümölcineli Apt. 16/9 34363 Şişli-İST.
+90 (212) 231 03 20 - 231 03 26
www.onexdental.com
info@onexdental.com