

High
Quality
Dental
Solutions



HTS-2/M/ZIRKON-120



MADE IN GERMANY

onexdental.com

HTS-2/M/ZIRKON-120




60 ÜYE KRON veya SİENTERLEME DİSKİ

- Yüksek saflıkta molibden-disilisit ısıtma çubukları ile PRO
- Maksimum sıcaklık 1650°C
- Isıtma odası kapasitesi 2x Ø 120/30 mm
- Program kontrolü
 - LCD-Ekran
 - 4 kademe
 - 30 program kapasitesi
 - Özel fonksiyonlar
- Servis programları
 - A - Isı kontrolü*
 - C - Isıtma odası temizlenmesi
 - E - Isıtma çubuklarının yenilenmesi
- S Tipi, PtRh-Pt Termokupl
- 1500°C +/- 3 °C'de sıcaklık hassasiyeti
- Zamanlayıcı fonksiyonu

* sadece test kiti ile birlikte



RS-232 Arayüzü, analiz veya uyumluluk için gerçek zamanlı program verilerini kaydetmenize olanak tanır

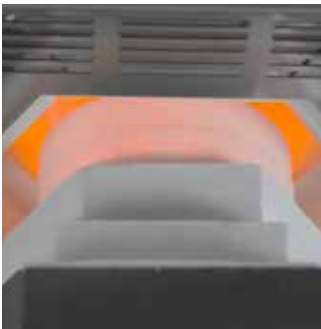

Teknik Bilgiler	HTS-2/M/ZIRKON-120
Maksimum Güç	3200 W
Voltaj aralığı; Frekans	200 – 240 V; 50/60 Hz
Ağırlık	60 kg
Ebatı G/D/Y	390/500/790 mm

Teknik Bilgiler



HTS-2/M/ZIRKON-120
7202000002

Detaylar ✓ standart ✗ uyumlu değil

Teknik Bilgiler		
Isıtma odası yüksekliği	mm	72
Maksimum ısıtma odası kapasitesi	kase sayısı	 2 x 120/30 mm
Isıtma sistemi		
İşlemler		
Maksimum Sıcaklık		
Isıtma çubukları	Tür	
	Sayı	4
CLASSIC işlem süresi [1*]		
Maksimum programlanabilir ısıtma oranı	°C/dk.	30
230V'da 1.500 °C'ye kadar en kısa ısıtma süresi	dakika	55
300 °C'de en kısa soğutma süresi	dakika	47
İşlem süresi (30 dakika bekleme süresi dahil)	dakika (s)	132 (2,2)
SPEED işlem süresi [1*]		
Maksimum programlanabilir ısıtma oranı	°C/dakika	99
230V'da 1.500 °C'ye kadar en kısa ısıtma süresi	dakika	25
750 °C'de en kısa soğutma süresi	dakika	18
İşlem süresi (30 dakika bekleme süresi dahil)	dakika (s)	73 (1,2)
Program Kontrolü		
7 segmentli LED		✗
4-renk tonlu LCD		✓
Programlanabilir kademe sayısı		4
Program kapasitesi		30
	Sabit programların sayısı	✗
	Özelleştirilebilir program sayısı	30
Özel programlar		
Kurutma		✓
Havalandırılabilir ısıtma		✓
Servis programları		
A-Isı kontrolü [2*]		✓
C-Isıtma odası temizlenmesi		✓
E-Isıtma çubuklarının yenilenmesi		✓
Thermokupl		
PtRh-Pt, S tipi		✓
Özel fonksiyonlar		
Acil soğutma sistemi		✗
RS 232 arayüzü		✓
Kapı asansörü		✓
Korumalı gaz tedariği		✗
Zamanlayıcı fonksiyonu		✓

Teknik Bilgiler		
Maksimum Güç	W	3200
Voltaaj aralığı; Frekans	V; Hz	200-240; 50/60
Ağırlık	kg	60
Ebatı G/D/Y	mm	390/500/790

[1*] İşlem değerleri: Sinterleme ısısı = 1500°C; bekleme süresi = 30dk.; 1 x pırlama kasesi [2*] sadece test kiti ile birlikte

Teslimat kapsamı

- ✓ standart
- opsiyonel olarak mevcut
- opsiyonel olarak mevcut, fakat koşullu
- ✗ uyumlu değil



HTS-2/M/ZIRKON-120
7202000002

Fırının parçaları	
8201000001 Sinterleme boncuğu AL, 4-6; 200g	●
8201000002 Sinterleme boncuğu YTZ, 2.0; 200g	●
8201000003 Sinterleme boncuğu YTZ, 1.25; 280g	●
8201000004 Sinterleme granülü YTZ; 200g	✓
8201000008 Pişirme kasesi, 120/30***	✓
8201000010 Pişirme kasesi kapağı, 120/4***	○
8201000014 Pişirme kasesi SPEED, 120/30; oluklu	✓
8201000015 Pişirme kasesi SPEED, 120/30 (set)	●
8201000018 Pişirme taban plakası SPEED, 120/15	●
8201000019 Pişirme taban plakası SPEED, üst halka 120/15	●
8201000021 Pişirme disk, 120/12***	○
8203000003 Pişirme kasesi ara disk, 120/15	✓

Aksesuarlar	
8202000001 Pişirme kabı tutucusu, 100-120mm	✓
8202000005 Pişirme disk için Elmas temizleme taşı	●
8202000008 Güç kablosu AB, C19; 16A	✓
8202000009 Güç kablosu ABD, C19; 16A	●
8202000010 Güç kablosu BK, C19; 13A	●

***DİKKAT! SPEED sinterlemeye uygun değil!



MIHM-VOGT GmbH & Co. KG

Friedrich-List-Straße 8
76297 Stutensee-Blankenloch Germany

Web
Mail

www.mihm-vogt.de
info@mihm-vogt.de

İSTİKRARLI. GÜVENİLİR. HASSAS.

High
Quality
Dental
Solutions

Onex Dental Tic. Ltd. Şti.
19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad.
Gümülçineli Apt. 16/9
34363 Şişli - İSTANBUL
Tel : +90 212 231 03 20 - 231 03 26
Fax: +90 212 231 02 80
info@onexdental.com
www.onexdental.com

onexdental

OnexDental
— TECHNOLOGY —