

HIZ İÇİN TASARLANAN

Yeni **mv-r** sinterleme fırını.



High
Quality
Dental
Solutions


MADE IN GERMANY

onexdental.com

MV-R



40 ÜYE KRON veya Ø 100 SİNERLEME DİSKİ

▼ Yüksek saflıkta molibden-disilisit ısıtma çubukları ile PRO

▼ Maksimum sıcaklık 1650°C

▼ Ebatı Ø 100

▼ Program kontrolü

7 inç Dokunmatik Ekran

USB veri arayüzü

200 program/10 kademe kapasitesi

Özel fonksiyonlar

▼ Servis programları

1 - Isı kontrolü*

2 - Isıtma odası temizlenmesi

3 - Isıtma çubuklarının yenilenmesi

▼ S Tipi, PtRh-Pt Termokupl

▼ 1500°C +/- 1 °C'de sıcaklık hassasiyeti

▼ Zamanlayıcı fonksiyonu

* sadece MV test kiti ile birlikte



SPEED PLUS (200°C/dakika)



7 inç DOKUNMATİK EKTRAN



BELİRLİ ISIDA BEKLETME



QR KODU ARACILIĞIYLA HATA TEŞHİSİ



DATA TRANSFER USB ÜZERİNDEN



KONTROLLÜ CİHAZ İÇİ SOĞUTMASI



LINEAR SOĞUTMA

Teknik Bilgiler



MV-R

Teknik Bilgiler


Isıtma sistemi	
İşlemler	
Maksimum Sıcaklık °C	1650°C **
Isıtma çubukları Tür/Sayı	MoSi2 / 4
En kısa ısıtma süresi dakika	8 dakikada 1500°C "SPEED Devrimi"
Termokupl türü	S Tipi, PtRh-Pt
1500 °C'de sıcaklık hassasiyeti °C	+/- 1°C
Maksimum ısıtma odası kapasitesi Kase sayısı	** 2 x 100/30 mm
Isıtma odası yüksekliği mm	75 mm
Program Kontrolü	
Maksimum sıcaklık artışı °C/dakika	0-900 °C 200 °C/dakika 901-1200 °C 150 °C/dakika 1201-1650 °C 125 °C/dakika
Program kapasitesi	200
Programlanabilir ısıtma / soğutma kademelerinin sayısı	10
Minimum sıcaklık oranı °C/dakika	0,1 °C/dakika
Özel fonksiyonlar	Kurutma; Havalandırmalı ısıtma; Belirli ısıda bekleme
Servis programları	1- Isı kontrolü* 2 - Isıtma odası temizlenmesi 3 - Isıtma çubuklarının yenilenmesi

* sadece MV test kiti ile birlikte

** Pişirme kasesi SiC, 100/30 max. 1550°C!

Özellikler

7 inç Dokunmatik Ekran	✓
Kolay Menü gezinimi	✓
USB ile güncelleme	✓
QR kodu aracılığıyla hata teşhisi	✓
Yeniden başlatıldığında sistemin test edilmesi	✓
Soğutma fanı izlemesi ile kontrollü cihaz içi soğutma	✓
Zamanlayıcı fonksiyonu	✓
Linear Soğutma	✓

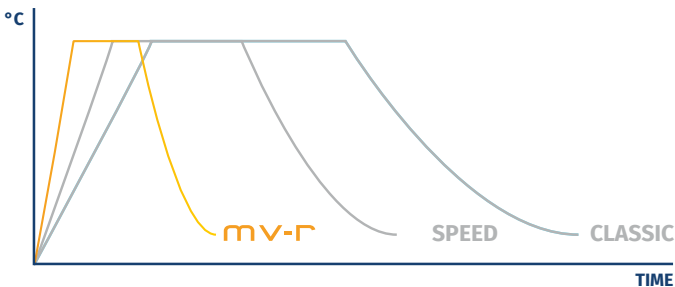

Teknik Bilgiler

MV-R

Maksimum Güç	3500 W
Voltaj aralığı; Frekans	200-240 V; 50/60 Hz
Ağırlık	65 kg
Ebatı G/D/Y	390/540/780 mm
Kilovat-saat cinsinden sinterleme döngüsü başına enerji tüketimi	1,8 kWh SPEED

Teslimat kapsamı

7204000100 mv-r, 15A-sinterleme fırını
7204000101 mv-r, 13A-sinterleme fırını



mv-r

✓ Standart

Fırının parçaları

8201000048 Pişirme kasesi SiC, 100/30, 1 adet	✓
8203000032 Pişirme kasesi için Termal kumaş desteği ,100/12; (5'li set)	✓
8201000004 Sinterleme granülü YTZ; 200g	✓
8203000039 Kumaş Sinterleme bezi, 40/12; SPEED Motion (set-5)	✓
8201000057 Pişirme kasesi kapağı 100/10;	✓
** Pişirme kasesi SiC, 100/30 maksimum. 1550°C!	✓

Aksesuarlar

8202000017 Pişirme kabı tutucusu, 18/10, 100;	✓
8202000008 Güç kablosu AB, C19; 16A	✓
8202000010 Güç kablosu BK, C19; 13A	Sadece mv-r, 13A sinterleme fırını ile mevcuttur



www.mihm-vogt.de/en/mv-r



MIHM-VOGT GmbH & Co. KG

Friedrich-List-Straße 8
76297 Stutensee-Blankenloch Germany

Web www.mihm-vogt.de
Mail info@mihm-vogt.de

**İSTİKRARLI.
GÜVENİLİR.
HASSAS.**



**High
Quality
Dental
Solutions**

Onex Dental Tic. Ltd. Şti.
19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad.
Gümülcineli Apt. 16/9
34363 Şişli - İSTANBUL
Tel : +90 212 231 03 20 - 231 03 26
Fax: +90 212 231 02 80
info@onexdental.com
www.onexdental.com

onexdental

OnexDental
— TECHNOLOGY —